


コードレス
ウォーターフロス

保証書付
取扱説明書

型番:HB-CA13-W
品番:00-5878

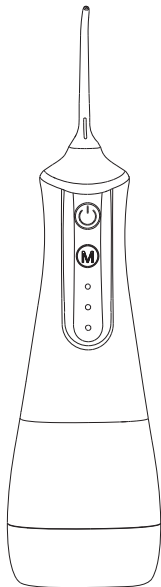

このたびはコードレス ウォーターフロスをお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

保証書			
商品名	コードレス ウォーターフロス		
型番	HB-CA13-W	品番	00-5878
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から) ※付属品は除く			
お客様	ふりがな		
	★お名前	様	
	★ご住所	〒 -	
	電話	()	
販売店	★住所 店名 電話		

(注)
★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室
●通話料無料
0120-963-006
●携帯電話・IP・公衆電話からは
048-992-2735
電話受付
平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は
修理ご相談センター
電話 **048-992-3970**
受付 平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内で多次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告	この表示を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	注意	この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。
<p>必ず守る</p>	<p>万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに電源を切り、使用を中止する。充電中の場合は充電コードを取り外す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。 	<p>禁止</p>	<p>ノズル先端部以外を歯や歯ぐきにあてない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●歯や歯ぐきを傷つけたり、故障の原因になります。
	<p>次の方は使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自分で操作ができない方 ・口内の感覚が敏感な方 ・口腔または歯周の手術直後や治療中の方 ・口腔内に気になる病状(治療中の歯、不安定な入れ歯など)がある方 ・歯ぐきからの出血が続く、または大量の出血がある方 <ul style="list-style-type: none"> ●傷口の悪化やけがの原因になります。 ●歯周病の疑いがある方は歯科医にご相談のうえ、使用してください。 		<p>口腔洗浄以外の目的に使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●目・鼻・耳・のどなどに水流をあてると事故やトラブルの原因になります。
	<p>付属品ノズルは家族や他人と共用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●病原菌に感染する原因になります。 		<p>人以外に使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●事故やトラブルの原因になります。
	<p>お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●思わぬけがを負うおそれがあります。 <p>本体を分解、修理、改造しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電の原因となります。 		<p>自分で意思表示ができない人に使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●事故やトラブルの原因になります。 <p>タンクに40℃を超える温水をいれない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどの原因になります。 <p>お手入れの際、シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使わない。また、化粧品やハンドクリームなど油成分の付いた手で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障・変形・変色の原因となります。
		<p>必ず守る</p>	<p>周囲の人の不意の動作に気をつける。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●接触によりけがをするおそれがあります。 <p>使用後は電源を必ず切る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●充電電池の消耗を抑えます。

リチウムイオン電池について


本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は繰り返し充電できますが、充電回数や経年変化により性能が徐々に低下します。充電時間が長くなったり、給電性能が落ちてきたら、新しい製品をお買い求めください。なお、製品を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。

防水保護等級について

本機はIEC保護等級(IEC60529)による水浸水に対する保護等級(IPX6)(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けない)仕様となっておりますが、以下の点にご注意ください。

- 長時間、水中に放置しないでください(浸水する可能性があります)。
- 石けんの泡やオイルのついた手でさわらないでください(浸水する可能性があります)。
- ドライヤーなどで乾かささないでください(密閉部が変形する可能性があります)。
- 水の浸入による故障につきましては保証期間内でも有料修理となります。

各部の名称と用途

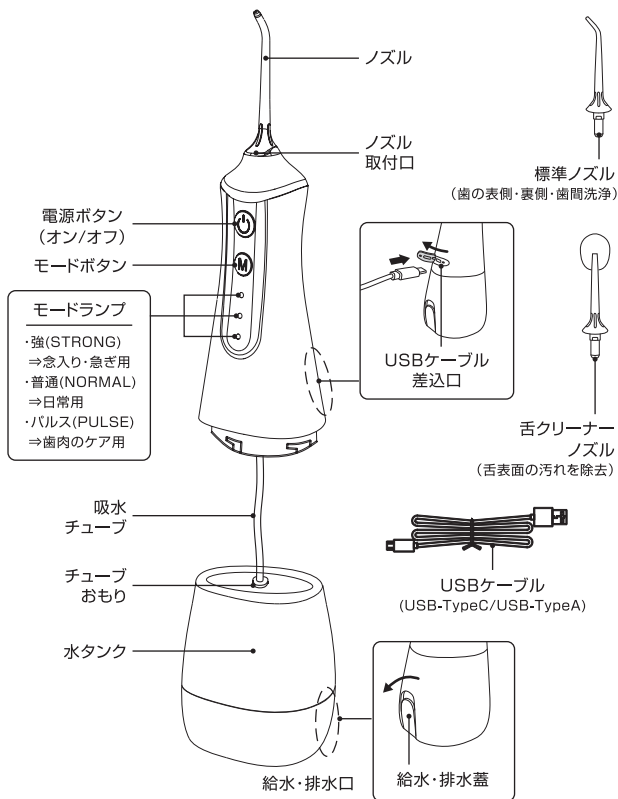


充電のしかた


ご使用前に本体の充電を行なってください。フル充電で、約60分使用できます。(1日2回/1回につき1分使用時/フル充電の場合)

※必ず本体と、手がぬれていないことを確認してください。

① 本体のうしろにあるUSBケーブル差込口のカバーを開け、付属のUSBケーブルの「USB-Type-C」端子を差し込みます。

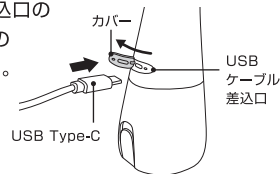

② ACアダプタ(5V1A以上・別売)に、USBケーブルの「USB-Type-A」端子を差し込み、アダプタをコンセントに差し込みます。

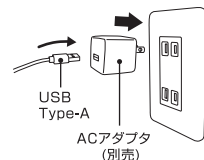

③ 本体のモードランプが上から下まで順番に点滅し、充電が始まります。


※充電中は使用できません。
※空の状態から満充電までは約4~5時間かかります。

※充電推奨温度: 10℃~35℃
周囲の温度により充電時間が長くなったり、充電しにくくなったりすることがあります。

④ モードランプが3つ同時に点灯すると、充電が完了します。

⑤ 充電後はACアダプタを抜き、本体からUSBケーブルを取り外してください。

⑥ カバーをしっかりと閉じた状態にしてください。(水が本体内部に浸水し、故障の原因となります。)

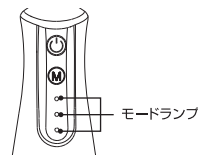

モードランプの点滅

モードランプが3つ同時に3回点滅を10回繰り返した場合は、充電電池の残量が少なくなっているサインになります。充電を行ってください。

ノズルの取り付けかた


充電が完了しましたら、標準ノズル、もしくは舌クリーナーノズルを本体に取り付けてください。

※必ず電源がオフになっていることを確認してください。

●ノズルの取り付け


ノズルを右向きにして、ノズルの突起部を本体の取付口にしっかりと差し込み、時計回りに回して取り付けます。

※ノズルが本体から抜けないことを確認してください。

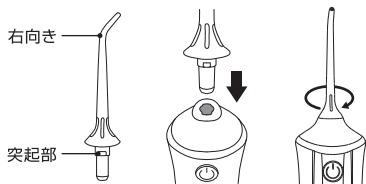

●ノズルの取り外し

ノズルを反時計回りに回して、本体から取り外します。

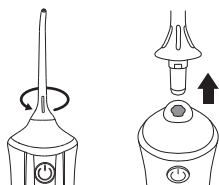

水の入れかた

ノズルの取り付けが完了しましたら、本体に水を入れます。水は給水・排水口と水タンク、どちらからでも入れることができます。

※必ず電源がオフになっていることを確認してください。


※常に新しい水道水、またはぬるま湯(40℃以下)を入れてください。

●給水・排水口から水を入れる

① 本体のうしろにある給水・排水蓋を開けて、水を入れます。

② 水を入れ終わったら、しっかりと蓋を閉めてください。

※水を満杯まで入れると、蓋を絞めるときに水が溢れるおそれがあるため、ご注意ください。

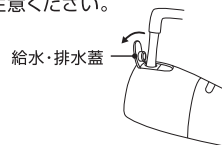


●水タンクを取り外して水を入れる

① 水タンクを反時計回りに回して本体から取り外し、水を入れてください。

② 本体にある突起部を水タンクの上にある溝に差し込んで、時計回りに回して、しっかりと本体に取り付けてください。

※水を満杯まで入れると、本体に取り付けるときに水が溢れるおそれがあるため、ご注意ください。

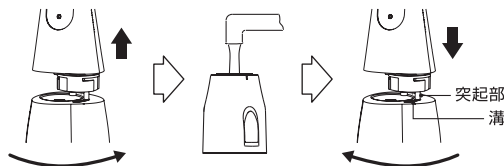

①流水を受けられる洗面所や洗面器の上に、顔を出して使用してください。

※ノズルから出る水は、周りに飛び散る可能性がありますので、必ずぬれてもいい場所で使用してください。

②モードボタンを押して、モードを選択します。

※選択されたモードランプが点灯します。

※初めて使用する場合は、「普通」モードでの使用をおすすめします。

③口に標準ノズルを入れます

④標準ノズルを歯と歯肉の間に垂直にあてます。

※ノズル別の洗浄方法の詳細については、下段の「ノズルの使用例」をご参照ください。

⑤軽く口を閉じます。

⑥電源ボタンを押して、洗浄を始めます。

※洗浄後の水は口から出てくるようにして、使用してください。

⑦洗浄完了後に、もう一度電源ボタンを押すと、電源が切れます。

⑧電源を切ったあとに、ノズルを口から出します。

※電源が入った状態で、ノズルを口から出すと、水が周りに飛び散ります。




電源ボタン

モードボタン

モードランプ

- ・強 (STRONG)
⇒ 念入り・急ぎ用
- ・普通 (NORMAL)
⇒ 日常用
- ・パルス (PULSE)
⇒ 歯肉のケア用

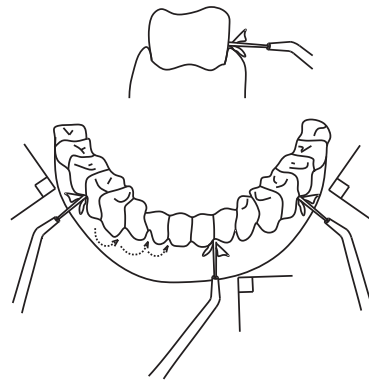

自動電源オフと、メモリー機能

電源を入れて2分後に自動的に電源が切れます。続けて使用する場合は、電源ボタンを押してください。また電源が入った状態で、もう一度電源ボタンを押すと電源は切れます。

本製品はメモリー機能を搭載しており、次に電源を入れたときは、最後に電源を切ったときのモードで起動します。

ノズルの使用例



※洗浄する部位によってノズルを使い分けます。

※ノズルを交換するときは、必ず電源がオフになっていることを確認してください。

●標準ノズル

歯と歯肉の間や、歯と歯の間、歯の表側・裏側にノズルから出る水流を垂直にあてて、洗浄します。


※ノズルの先端の透明部分は、歯や歯ぐきに直接あてないでください。

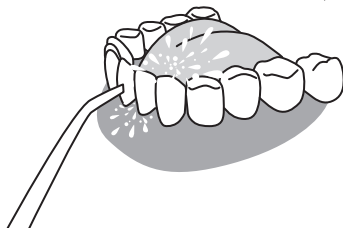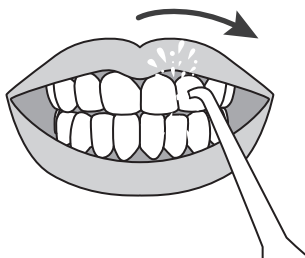

●舌クリーナーノズル

水を出しながら、ノズルの先端のスパーン形をかぶせるようにして、舌の奥から手前にゆっくりと一方行に舌表面を洗浄し、それを数回繰り返します。

※ノズルの先端の透明部分は、歯や歯ぐきに直接あてないでください。

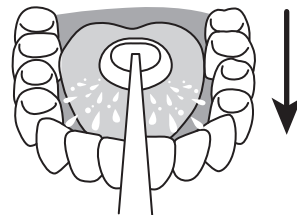

ノズル交換時期の目安

衛生上、約6ヶ月での交換をおすすめします。

ノズルが変形したり、変色したりしたら、すぐに交換してください。

専用ノズル(別売)

型番: HB-CAH13 品番: 00-8348

お手入れのしかた

※必ず電源がオフになっていることを確認してください。

●ノズル

- ①使用後は、毎回ノズルを外してください。
※「ノズルの取り付けかた」をご参照ください。
- ②水道水でノズルを洗い、余分な水分を拭き取ったあとに、
風通しのよい日陰で乾燥させてください。

●本体

- ①使用後は給水・排水蓋を開け、水タンクの水を毎回捨ててください。
または水タンクを本体から取り外して、水を捨ててください。
※「水の入れかた」をご参照ください。
- ②水を捨てたあとに、電源を入れ、空運転をし、本体に残っている水を
すべて出してください。
- ③水が出なくなったら、電源をOFFにしてください。
- ④水道水で本体と水タンク、吸水チューブを洗い、
給水・排水蓋を開け、風通しのよい日陰で乾燥させてください。
- ⑤水の出が悪くなったときは、チューブおもりを柔らかいブラシ、
または乾いた布で軽くこするように、汚れを取り除いてください。

汚れを拭き取る際に、シンナーやベンジン、
アルコールは絶対に使用しないでください。
変形や変色のおそれがあります。



シンナー、ベンジン、
アルコールなどは使用しない

- ⑥水タンクが乾燥しましたら、本体に取り付けます。
※「水の入れかた」をご参照ください。

主な仕様

電源	DC5V/1A
内蔵電池	充電式 リチウムイオン電池(2,000mAh/交換不可)
動作時間	約60分(1日2回/1回につき1分使用時/フル充電の場合)
充電時間	約4~5時間
防水仕様	IPX6 (あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けない)
外形寸法	(約)幅78×高さ298×奥行79mm(標準ノズルを含む)
質量	約272g(標準ノズルを含む)
水タンク量	260ml
USBケーブル長	約500mm
付属品	標準ノズル(2本)・舌クリーナー(2本)・ 専用USBケーブル(※ACアダプタは付属していません)・ 保証書付取扱説明書

※本パッケージで使用しているイラストや写真はイメージです。

実際とは多少異なる場合があります。

※改良のため、予告なくデザインが変更する場合がありますのでご了承ください。

故障かなと思ったら

症状	確認事項・考えられる原因	処置・対策
動作しない	十分に充電されていますか。	約4~5時間充電してください。
充電できない	USBケーブルがUSBケーブル差込口に 正しく差し込まれていますか。	確実に差し込んでください。
	USBケーブルがACアダプタから 抜けていませんか。	
	ACアダプタがコンセントから 抜けていませんか。	
水の出が悪い 水がノズルから出ない	水タンクに十分な量の水が入っていますか。	水道水またはぬるま湯(40℃以下) を入れてください。
	電源が切れかけていませんか。	充電してください。
	ノズルが詰まっていますか。	ノズルを洗浄してください。
	ご使用の際、本体を傾けすぎていませんか。	本体を立ててご使用してください。
ノズルの付け根から 水もれする	ノズルと本体の取付口は正しく取り付け られていますか。	ノズルを正しく取り付けてください。
水タンクと本体の間 から水もれする	水タンクと本体は正しく取り付けられて いますか。	水タンクを正しく取り付けてください。