

家庭用電気マッサージ器 「プチリラク」取扱説明書

このたびは、弊社の家庭用電気マッサージ器をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
ご使用になる前に、本取扱説明書をお読みになり正しくご使用ください。

お読みになったあとは、大切に保管してください。

❖ ご使用になる前に

●安全上のご注意<必ずお守りください>

下記の記載事項は、お使いになる方およびまわりの方への危害や物的損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

- ① 禁止（してはいけないこと）を示します。
- ② 指定する行為の強制（指示）を示します。

⚠ 警告

正しく取り扱われなかった場合、人が死亡または重傷を負うことが想定される事項を示しています。

- ① 次の方は本製品を使用しないでください。
 - 医師からマッサージを禁じられている方
 - 例 血栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症などの治療を受けている方
- ② 次の方は本製品をご使用前に必ず医師の相談を受けてください。
 - ペースメーカーなど体内植え込み型医用電気機器を使用している方
 - 悪性腫瘍のある方
 - 皮膚に外傷のある方
 - 心臓に障害のある方
 - 妊娠している方および産後直後の方
 - 糖尿病などによる高度な抹梢循環からくる知覚障害のある方
 - 皮膚に創傷のある方
 - 安静を必要とする方
 - 体温38℃以上（有熱期）の方
 - 骨粗しょう症の方および脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど急性疾患の方
 - 脊椎に異常のある方または背骨が左右に曲がっている方
 - その他、医療機関で治療中の方
- ③ 他の治療器と同時に使用しないでください。

⚠ 注意

正しく取り扱われなかった場合、人が障害を負うことまたは物的損害が発生することが想定される事項を示しています。

- ① 病院や接骨院など業務用には使用しないでください。本機は業務用としての機能は備えていません。
- ② 修理・分解・改造をしないでください。特に機器が故障した際は、勝手に修理などせずに、販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

<使用前のご注意>

- ① 本体に破損やひび割れがないことを確認してください。
- ② ご使用前に手に持った状態で、正常に動作するか確認してからご使用ください。
- ③ 本製品をしばらく使用しなかった後でご使用になる場合は、機器が正常にかつ安全に作動することを確認してから、ご使用になってください。

<使用中のご注意>

- ① 10分以上の連続したご使用は避けてください。
- ② 機器に故障が発見された場合には、使用を直ちに中止し、電源を切ってください。
- ③ 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
- ④ 本製品を使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門家に相談してください。
- ⑤ 本製品を浴室など水回りで使用する際は、使用前に電池蓋が確実に閉じていることを確認してください。また、水回りで電池蓋を開けないでください。
- ⑥ 塩水・温泉では使用しないでください。
- ⑦ 落下など強い衝撃を与えないでください。
- ⑧ 本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
- ⑨ 小さなお子様や乳幼児には使用させないでください。また、本体の上に乗って遊んだり、本体に乗ったりしないでください。
- ⑩ 火気・熱気の近く、エアコンの風が直接あたるところ、直射日光のあたるところでは、使用しないでください。

<使用后および保管時のご注意>

- ① 小さなお子様、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ② 長期間（80日以上）ご使用にならない場合は、衛生的に保ち電池を取り外し湿気が少なく極端な高温・低温にならない場所に保管してください。

お手入れおよび廃棄時の注意

- ① お手入れをする際は、水または中性洗剤を柔らかい布に含ませ、かたく絞ってからやさしく拭いてください。その後、乾いた柔らかい布で拭いてください。
※シンナー・ベンジン・アルコール・クリーナーなどは絶対に使用しないでください。
- ② 本製品を廃棄する際は、電池を取り外しお住まいの地方自治体の指示に従って廃棄してください。


⚠ 警告 電池の取扱いについて

- ① 万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察・治療を受けてください。
- ② 万一、電池の液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
- ③ 充電式電池は使用しないでください。
- ④ 電池の極性(⊕、⊖)を正しく入れてください。液漏れ破裂、発熱などが発生し、ケガや火災の原因になります。必ず指定の電池を使用し、同一ブランドの新品の電池と交換してください。また、長期間（80日以上）使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。液漏れ、破裂などが発生し、故障の原因になります。
- ⑤ 電池を火中に入れたり、加熱、水浸させないでください。液漏れ、破裂の原因になります。
- ⑥ 電池を廃棄する際はお住まいの地方自治体の指示に従ってください。


❖ 製品仕様

一般的名称	家庭用電気マッサージ器 34662000
販売名	プチリラク
型番	HB-M03-P/K/A
医療機器の区分	管理医療機器
品目仕様	振動機能(毎分4,900回)
認証番号	223AKBZX00055000
電源	DC1.5V ー—ー
使用電池	単3形乾電池×1本(電池別売)
電池寿命	アルカリ乾電池使用時：約1ヶ月 マンガン乾電池使用時：約2週間 (室温20℃、1日5分使用時)
外形寸法	(約)外径25×長さ144mm
質量	約60g(電池重量を除く)
付属品	取扱説明書(本書：保証書付) 添付文書

各部の名称

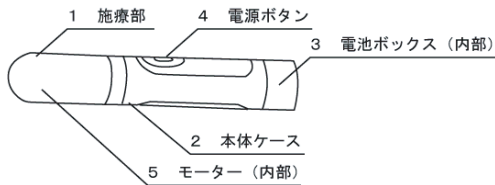

電池の交換方法

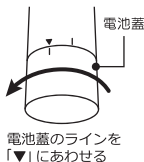

1. 電池蓋を反時計回りに回し電池蓋を取り外します。


電池蓋のラインを「▼」にあわせる



2. 電池を取り外してください。

⊕極が手前

3. 電池の極性を確認して確実にセットしてください。

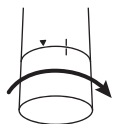

電池蓋のラインを「↑」にあわせる

4. 電池蓋を時計回りに回し電池蓋を閉じてください。

操作方法又は使用方法等

※初めてご使用の際は、電池をセットしてください。

・使用前

- (1) いつも本体を清潔にする。
- (2) 本体に⊕、⊖の極性に注意して電池を入れる。
- (3) 電源ボタンを押して、電源を入れる。このとき、正常に動作しているか確認する。
- (4) 本体の治療部を患部にやさしくあてる。

・使用中

- (1) 本体を手に持ち、治療部を患部に接触させたまま保持する。
※10分以上の連続運転はおやめください。

ご使用例

本体治療部を患部にあててください。



・使用后

- (1) 治療部を患部から離す。
- (2) 電源ボタンを押して、電源を切る。
- (3) 汚れをふき取り、清潔にする。
- (4) 高温多湿の場所を避け、室温で保管する。
長期間使用しない場合は、必ず電池を外す。

完全防水

本製品はIPX7(旧JIS保護等級7)の防水機能を備えております。防水性能を保つために、次のことに注意してください。

1. 電池蓋を確実に閉めてください。その際、パッキンに異物が挟み込まれていないことを確認してください。
2. 防水機能は真水のみ対応しており、洗剤や薬品、温泉などには対応していません。
3. 本体が濡れているときは電池蓋を開け閉めしないでください。
4. 1mより深い所に浸さないでください。また、30分以上水中で使用しないでください。

故障かと思ったら...

故障かと思ったら、最初に下記の内容を確認してください。

1. 電源ボタンを押しても電源が入らない。
●電池の極性(⊕、⊖)が正しくセットされているか確認してください。
- 電池を新しいものに交換してください。
※本書表面の電池の取扱いについてもあわせてご覧ください。

保証書

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、公害、塩害、及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店 seals や領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	プチリラク		
品番	08-1480/08-1481/08-1482		
型番	HB-M03-P/K/A		
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	本体1年(お買い上げ日から)		
お客様	★お名前	(〒 -)	
	★ご住所		
	電話番号		
販売店	★住所	店名	電話

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県川口市 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

話料無料 0120-963-006

携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

電話受付 平日9:00~17:00

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

048-992-3970